


Être prêt
à chaque
instant.



**LIFELINKcentral™ AED program manager et
les DAE connectés HeartSine®**

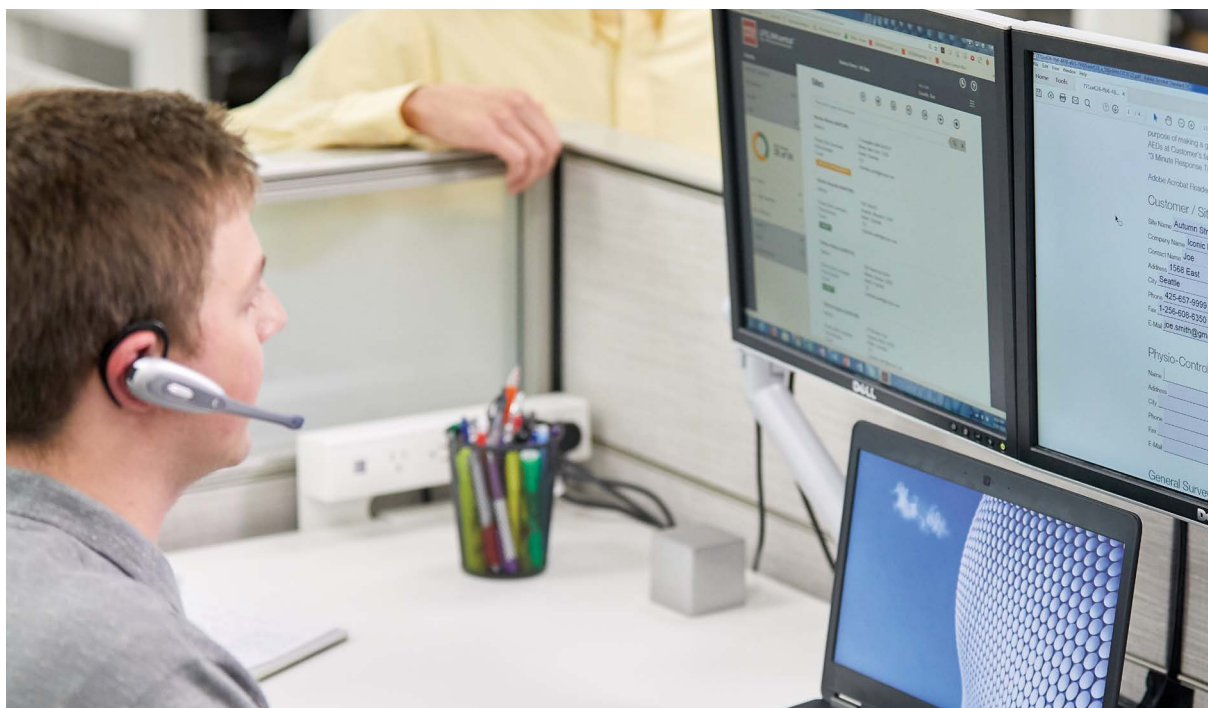

Prenez les choses en main avec une solution connectée complète pour la gestion du programme de DAE (Défibrillateur automatisé externe).

Les DAE fonctionnent.

Mais uniquement s'ils sont prêts.

Tout le monde peut être victime d'un arrêt cardiaque soudain, n'importe quand et n'importe où. C'est pourquoi les défibrillateurs pour lieux publics sont importants. Leur technologie permet de contribuer à sauver des vies aux endroits où ils sont le plus utile. Toutefois, la maintenance régulière des systèmes est chronophage et source d'erreurs humaines.

Prêt en toutes circonstances.


En fournissant une surveillance à distance, LIFELINKcentral AED program manager permet une gestion plus facile et précise de vos DAE. LIFELINKcentral program manager facilite la gestion à distance par une connexion Wi-Fi à chaque DAE connecté HeartSine. Les informations sur la disponibilité du DAE, automatiquement recueillies par le logiciel, et les dates de péremption des Pad-Pak, sont suivies pour faciliter la gestion, que vous possédiez un seul DAE ou que vous en ayez 100, dans un bureau unique ou répartis sur des milliers de kilomètres. LIFELINKcentral AED program manager vous envoie même des alertes des situations pouvant affecter la disponibilité.

Pour chaque DAE connecté HeartSine, vous pouvez :


- Surveiller à distance les informations de disponibilité
- Recevoir des alertes des situations pouvant affecter la disponibilité
- Visualiser le statut de tous les DAE connectés
- Obtenir des notifications si la date de péremption d'un Pad-Pak approche ou a été dépassée
- Visualiser son emplacement sur une carte

Systeme de gestion complet.*

Vous pouvez gérer tous vos DAE avec LIFELINKcentral AED program manager, même ceux qui ne sont pas connectés. Une fois les informations sur l'appareil saisies manuellement, vous pouvez mettre à jour les données d'inspection selon un calendrier régulier. LIFELINKcentral vous offre un aperçu de la disponibilité de votre DAE et du secouriste. Vous pouvez même les pointer sur une carte et créer des alertes pour le remplacement programmé des batteries ou des électrodes.

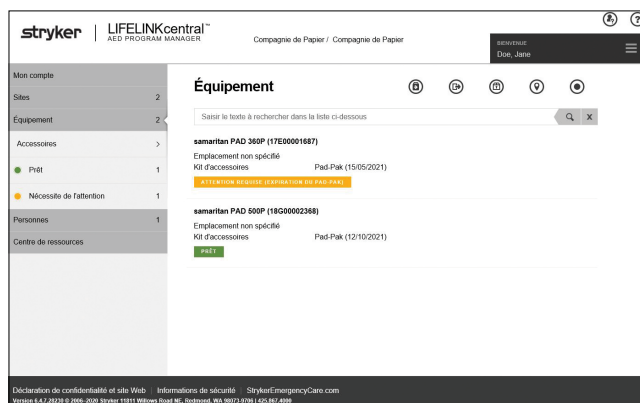

Licence Basic

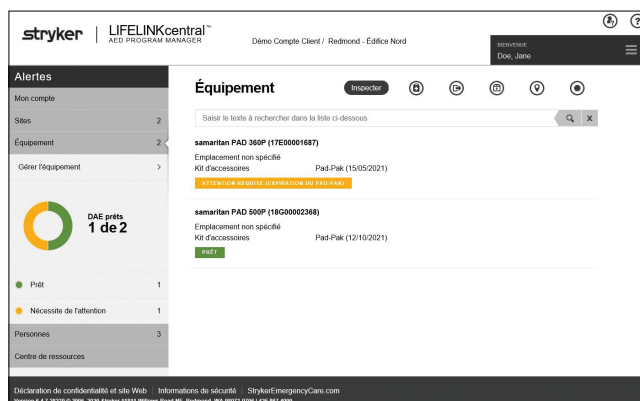

Licence PRO

*Fonctionnalités disponibles uniquement avec la licence LIFELINKcentral PRO.



Choisissez la licence adaptée à vos besoins

La licence Basic de LIFELINKcentral AED program manager est incluse pour chaque DAE connecté Stryker, mais vous avez de nombreuses raisons d'investir dans une licence PRO.

Licences LIFELINKcentral	Basic	PRO
	Incluse avec un DAE connecté Stryker	Application de frais de compte*
Gestion de l'équipement		
Dispositifs/équipement pris en charge		
DAE connecté HeartSine avec HeartSine Gateway, Pad-Pak et/ou Pediatric-Pak	X	X
DAE connecté LIFEPAK CR2 avec batterie et électrodes QUIK-STEP	X ²	X
DAE non connectés Stryker (téléchargement manuel par l'équipe d'assistance Stryker)		X ³
Tous les autres DAE (téléchargement manuel par l'équipe d'assistance Stryker)		X ³
Tous les autres accessoires et équipements personnalisés		X
Suivi de la disponibilité de l'équipement		
Modification et affichage des détails de l'équipement	X	X
Affichage de la disponibilité des dispositifs et journaux de test (DAE connectés)	X	X
Affichage du plan de l'équipement	X	X
Affichage du statut de l'équipement via la roue de disponibilité		X
Enregistrement manuel des inspections		X
Gestion du site		
Suivi de la disponibilité du site		
Ajout, édition et affichage des informations du site	X	X
Options de configuration et du logiciel de gestion	X	X
Affichage du plan du site	X	X
Affichage du statut du site via la roue de disponibilité		X
Affichage du rapport de synthèse du statut du programme		X
Configuration de calendriers d'inspection personnalisés		X
GESTION du personnel		
Profils utilisateurs et rôles		
Ajout, édition et affichage des profils utilisateurs	X	X
Attribution des rôles du coordinateur du site et du coordinateur du programme	X	X
Disponibilité de l'intervenant		
Affichage du statut de formation via la roue de disponibilité		X
Attribution des rôles de l'inspecteur des DAE et de l'intervenant formé		X
Suivi des certifications/de la disponibilité de l'intervenant formé		X
Événements de formation		
Gestion des événements et listes de formation		X
Notifications par courriel		
Notifications de disponibilité pour les DAE connectés HeartSine et LIFEPAK	X	X
Notifications de disponibilité pour tous les autres DAE (équipements téléchargés manuellement par l'équipe d'assistance Stryker)		X ³
Notifications de disponibilité pour les équipements personnalisés		X
Support de compte		
Support de base par e-mail	X	X
Accès au centre de ressource en ligne	X	X
Options À la carte		
Téléchargement des DAE non-connectés et des autres DAE pour la licence PRO		X ³
Téléchargement groupé des accessoires HeartSine (10 au minimum)	X ³	X ³

1. La licence LIFELINKcentral PRO offre les services énumérés et est facturée sous forme de cotisation annuelle par compte.
2. La batterie et les électrodes QUIK-STEP fournies dans la boîte du DAE LIFEPAK CR2 seront couverts par la licence Basic. La licence PRO est requise pour la gestion des batteries de remplacement et/ou des supports d'électrodes QUIK-STEP supplémentaires.
3. Des frais de téléchargement s'appliquent.

Si vous avez acheté votre DAE (Défibrillateur automatisé externe) connecté HeartSine chez un distributeur ou un revendeur Stryker agréé, celui-ci aura accès à votre compte LIFELINKcentral AED program manager et pourra recevoir des notifications émises par le DAE connecté HeartSine. Notez bien que ce paramètre permettant de notifier votre distributeur ou revendeur peut être désactivé à TOUT moment : si vous souhaitez le désactiver, envoyez une requête au service clientèle de Stryker pour auto-gérer votre site sans notifications envoyées au distributeur ou revendeur.

Toutes ces revendications sont valables à compter de 04/2021.

Pour de plus amples informations, veuillez contacter votre représentant Stryker

Emergency Care Public Access

Il est recommandé que les utilisateurs des DAE soient formés à la réanimation cardio-pulmonaire (RCP) et à l'utilisation des DAE.

Bien qu'il ne soit pas possible de sauver toutes les victimes d'arrêt cardiaque, des études ont montré qu'une défibrillation précoce peut sensiblement améliorer le taux de survie. Les DAE sont indiqués pour une utilisation chez les adultes et les enfants. Les DAE peuvent être utilisés chez les enfants de moins de 25 kg, mais certains modèles requièrent des électrodes de défibrillation disponibles séparément.

Les informations présentées dans ce document ont pour but d'illustrer les divers produits de Stryker. Consulter les instructions d'utilisation pour obtenir des instructions complètes, des indications, des contre-indications, des avertissements, des précautions et des effets négatifs possibles, avant d'utiliser tout produit de Stryker. Les produits ne sont pas nécessairement disponibles dans tous les pays, car leur disponibilité dépend des pratiques réglementaires et/ou médicales dans chaque marché. Si vous avez des questions concernant la disponibilité des produits Stryker dans votre région, n'hésitez pas à contacter votre représentant. Les caractéristiques sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Les DAE HeartSine samaritan PAD 350P, 360P et 500P, et les Pad-Pak et Pediatric-Pak sont destinés à être utilisés pour administrer rapidement des chocs électriques pour réanimer les victimes d'un arrêt cardiaque soudain (ACS). Les DAE HeartSine samaritan PAD 350P, 360P et 500P, et les Pad-Pak et Pediatric-Pak sont des dispositifs médicaux marqués CE (classe IIb – 0123) conformément à la directive européenne MDD 93/42 (Medical Devices Directive, Directive sur les dispositifs médicaux) et aux autres Directives. Ils seront reclassés (classe III – 0123) conformément au règlement européen MDR (Medical Devices Regulation, Réglementation sur les dispositifs médicaux) au plus tard en mars 2024, fin de période de transition à la MDR. Le HeartSine Gateway est marqué CE conformément à la directive européenne RED (Radio Equipment Directive, Directive sur les équipements radioélectriques) 2014/53/EU.

Stryker ou ses filiales sont titulaires de, utilisent ou ont déposé une demande des marques commerciales ou marques de service suivantes : HeartSine, HeartSine Gateway, LIFELINKcentral, LIFEPAK, Pad-Pak, Pediatric-Pak, QUIK-STEP, Stryker. Toutes les autres marques commerciales sont des marques commerciales de leurs propriétaires ou titulaires respectifs.

Le fait que le nom ou logo d'un produit, d'une fonctionnalité ou d'un service ne figure pas dans cette liste ne constitue pas, de la part de Stryker, une renonciation à ses droits de marques commerciales ou à d'autres droits de protection de la propriété intellectuelle portant sur ce nom ou logo.

Les dispositifs Stryker sont fabriqués de manière à répondre aux objectifs élevés de qualité interne et à se conformer aux directives et normes de qualités en vigueur dans les pays où le dispositif est destiné à être mis sur le marché. Veuillez nous aider à atteindre ces objectifs en signalant à votre représentant Stryker, les plaintes concernant les produits, tout résultat inattendu ou tout problème lié à l'utilisation des produits.

Référence produit	Description produit
350-STR-FR-10	SAM 350P (plus adult Pad-Pak-03) French Language
350-STR-FR-AV	SAM 350P (plus TSO/Aviation Pad-Pak-07) French Language
350-STR-FR-GW	SAM 350P, HeartSine Gateway, 1 Pad-Pak-03, French (2 min CPR)
360-STR-FR-10	SAM 360P (plus adult Pad-Pak-03) French Language
360-STR-FR-AV	SAM 360P (plus TSO/Aviation Pad-Pak-07) French Language
360-STR-FR-GW	SAM 360P, HeartSine Gateway, 1 Pad-Pak-03, French (2 min CPR)
500-STR-FR-10	SAM 500P (plus adult Pad-Pak-03) French Language
500-STR-FR-AV	SAM 500P (plus TSO/Aviation Pad-Pak-07) French Language
500-STR-FR-GW	SAM 500P, HeartSine Gateway, 1 Pad-Pak-03, French (2 min CPR)
ACC-GTW-FR-01	HeartSine Gateway, French
PAD-PAK-03	Adult Pad-Pak combined battery & electrode cartridge
PAD-PAK-04	Pediatric-Pak combined battery & pediatric electrode cartridge
PAD-PAK-07	eTSO certified Aviation Pad-Pak



HeartSine Technologies Ltd.
207 Airport Road West
Belfast, BT3 9ED
Northern Ireland
United Kingdom
Tel +44 28 9093 9400
Fax +44 28 9093 9401
heartsinesupport@stryker.com
heartsine.com

Distribué par :

Stryker France S.A.S
ZAC - Avenue de Satolas Green
69330 Pusignan
France
Tel +33 4 72 45 36 00
Fax +33 4 72 45 36 99
333 710 275 RCS Lyon
Capital Social 27.495.520 €

Date de parution : 04/2021 ; Fabriqué au Royaume-Uni

M0000001254-AA FR ; SMACC 2021-28520

HeartSine SAM 500P n'est pas disponible aux États-Unis.

HeartSine Gateway n'est pas disponible dans tous les pays.

Copyright © 2021 Stryker.

HeartSine samaritan PAD: Classification UL. Voir le marquage complet sur le produit.